

Instructions d'utilisation de l'inhalateur brumisateur (Respimat®)

C'est un dispositif qui contient une solution aqueuse qui dégage une vapeur fine, sans gaz propulseurs. Ce nuage de vapeur se diffuse lentement.

Quand on appuie sur le bouton de libération de la dose et on inspire par l'embout buccal, le médicament est délivré directement dans les poumons avec l'air que nous inspirons. Une dose complète est libérée, indépendamment du flux inspiratoire. Cela simplifie donc la synchronisation entre la libération du médicament et l'inspiration.

Il est petit et léger.

Lorsque l'inhalateur est vide, il se bloque et ne peut plus être utilisé.

Il faut nettoyer l'embout buccal avec un chiffon humide une fois par semaine.

Comment insérer la cartouche et se préparer à utiliser l'inhalateur pour la première fois

Avant d'utiliser l'inhalateur pour la première fois et quand il est fini, vous devez insérer une cartouche. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous:




A. Tout en maintenant le capuchon vert fermé, appuyez sur le cliquet de sécurité et retirez la base transparente.

B. Sortez la cartouche de la boîte. Insérez l'extrémité la plus étroite de la cartouche dans l'inhalateur et poussez jusqu'à entendre un *clic*.

C. Poussez le fond de la cartouche légèrement contre une surface solide afin d'assurer qu'elle pénètre au maximum dans l'inhalateur. Remettez en place la base transparente. La cartouche est prête à l'emploi.



D. Tenez l'inhalateur en position verticale avec le capuchon vert fermé. Tournez la base dans la direction des flèches rouges imprimées sur l'étiquette jusqu'à entendre un clic (un demi-tour).

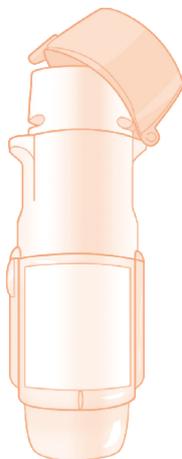

E. Ouvrez complètement le capuchon vert.

F. Dirigez l'inhalateur en direction du sol. Appuyez sur le bouton de libération de la dose.

Répétez les étapes D, E et F jusqu'à ce qu'un nuage soit visible, et de nouveau trois fois pour vous assurer que l'inhalateur est prêt à être utilisé. Si vous ne vous êtes pas servi de votre inhalateur depuis un certain temps, effectuez ces trois étapes.

Comment utiliser le brumisateur Respimat® ?

Chaque fois que vous l'utilisez, suivez les étapes ci-dessous aussi détendu que possible:

1. Tenez l'inhalateur en position verticale avec le capuchon vert fermé. Tournez la base dans la direction des flèches rouges imprimées sur l'étiquette jusqu'à entendre un *clic* (un demi-tour).

2. Ouvrez complètement le capuchon vert.

3. Expirez à fond pour bien vider vos poumons.

4. Sans inhaler, placez l'embout buccal entre les lèvres, sans boucher les aérations du dispositif. Appuyez sur le bouton de libération de la dose et inspirez lentement et profondément par la bouche

5. Retenez votre respiration

6. Expirez lentement.

7. Fermez le capuchon vert et reposez-vous pendant 30 à 60 secondes. Puis, répétez toutes les étapes du 1 au 7, pour faire encore une bouffée.

8. Lorsque vous avez terminé, gargarisez-vous et rincez votre bouche.

En cas de doutes, adressez-vous à votre infirmière.