

# 轻雾吸入器 (Respimat®) 使用说明


这是一种含有液化药物的装置，该药物可生成舒缓喷雾，且不含抛射剂。通过该装置，气雾可缓慢喷出。

按压药剂释放按钮并从喷嘴吸气时，药物会随吸入的空气进入肺部。无论吸气气流急缓，均释放完整剂量，因而方便实现出药与吸气的同步操作。

该吸入器体积小、重量轻。

吸入器不含药剂时即锁定且无法使用。

每周应使用湿布清洁喷嘴一次。

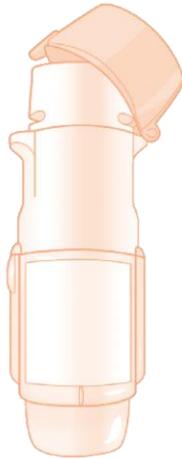

## 储雾罐安装与准备

第一次使用该吸入器或药剂用完时，须安装储雾罐。请按照下列步骤操作：



**A.** 保持绿色盖子闭合，按住安全扣取下透明底座。

**B.** 从盒子中取出储雾罐。将储雾罐较窄的一端放入吸入器，将其推入直至听到“咔哒”声。

**C.** 将储雾罐对着坚硬的表面轻轻按压，以确保它已完全插入吸入器。装上透明底座。至此，储雾罐已完成安装。



**D.** 保持绿色盖子闭合，以垂直方式握住吸入器。按标签上的红色箭头方向旋转底座，直至听到“咔哒”声（旋转半圈）。

**E.** 将绿色盖子完全打开。

**F.** 将吸入器朝向地面。按压按钮释放药剂。

重复步骤D、E、F直至看到喷雾，然后再重复三次以保证吸入器准备完毕。如果已若干天没有使用吸入器，请完成这3个步骤。

## 如何使用Respimat®吸入器？

请您以最放松的方式完成下列操作：

**1.** 保持绿色盖子闭合，以垂直方式握住吸入器。按标签上的红色箭头方向旋转底座，直至听到“咔哒”声（旋转半圈）。

**2.** 将绿色盖子完全打开。

**3.** 尽力将肺部空气呼出。

**4.** 屏住气将喷嘴放入嘴中，请勿堵住装置通风口。按压按钮释放药剂，并用嘴缓慢深吸气。

**5.** 屏气。

**6.** 慢慢呼气。

**7.** 盖上绿色盖子，休息30至60秒，再重复从1到7的所有步骤，完成第二次按压。

**8.** 完成后，使用漱口液漱口。

如有任何疑问，请向护士进行咨询。

