


Instrucciones de uso de Breezhaler®

¿Qué es el sistema Breezhaler®?


Es un dispositivo adaptado para la inhalación del fármaco contenido en una cápsula transparente, que previamente se coloca dentro y se perfora. Al coger aire a través de la boquilla del inhalador, el medicamento entra directamente en los pulmones. Produce una señal auditiva en el momento de la inspiración y tiene un sabor dulce. Ello indica que la administración se ha hecho correctamente. Contiene una base y una capucha. En la base hay un compartimento para la cápsula, una boquilla con un filtro y un pulsador. Debe limpiarse una vez a la semana por dentro y por fuera, con un paño limpio y seco, para eliminar los restos de polvo. No lo lave con agua.

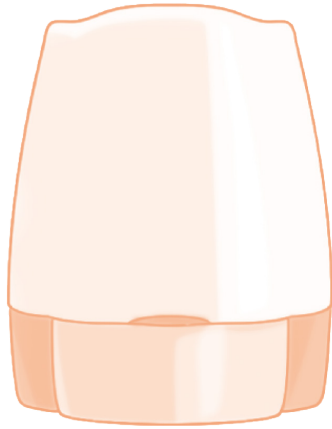

¿Cómo se realiza la inhalación con Breezhaler®?

Haga las maniobras siguientes tan relajadamente como le sea posible, de pie o sentado:

1. Quite el tapón.

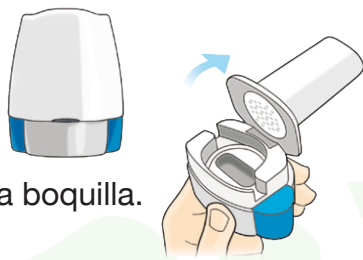

2. Sujete firmemente la base del inhalador e incline la boquilla.


3. Con las manos secas, saque una cápsula del blíster.



4. Introduzca la cápsula en el compartimento: no lo haga por la boquilla.



5 y 6. Cierre la boquilla. Perfore la cápsula presionando los botones laterales del inhalador una sola vez.

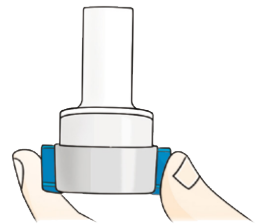

7. Expulse todo el aire de los pulmones que le sea posible (sin soplar dentro por la boquilla).



8. Ajuste la boquilla en los labios y levante la cabeza. Coja aire por la boca rápida y enérgicamente (sin presionar los botones laterales). La cápsula girará dentro de la cámara y notará un zumbido.



9. Retenga el aire dentro de los pulmones unos 10 segundos, o hasta que le sea posible.



10. Expulse el aire lentamente.



11. Verifique si la cápsula está vacía. Si no lo estuviera, repita los pasos del 7 al 10.



12. Al terminar, haga gárgaras y enjuáguese.



Ante cualquier duda, consulte con la enfermera.