

Open Acces



Revisió científica:

Grup de Respiratori de la CAMFiC

Edició i correcció lingüística:

EdiDe

Il·lustracions:


Fernando
Martín González

Instruccions d'ús del Novolizer®

Grup de Respiratori de la CAMFiC

Què és el sistema Novolizer®?

És un dispositiu en què s'ha de col·locar una càrrega que conté múltiples dosis d'un fàrmac en forma de pólvores seques. En agafar aire a través de l'embocadura de l'inhalador, el medicament entra directament als pulmons. S'ha de guardar en llocs secs per evitar que la humitat aglomeri les partícules del fàrmac. No s'ha d'agitar i s'ha d'utilitzar en posició vertical. La persona ha d'estar dreta o asseguda i amb l'esquena recta per facilitar la lliure expansió del tòrax.

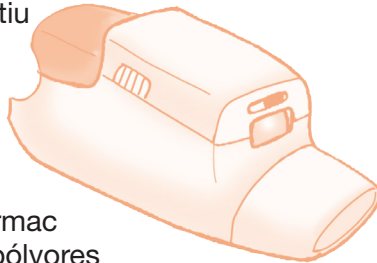

S'ha de netejar regularment l'embocadura amb un drap sec. No s'ha de rentar amb aigua, perquè les pólvores seques es poden veure afectades per la humitat.

Com es duu a terme la inhalació amb el Novolizer®?

Feu les maniobres següents tan relaxadament com pugueu, drets o asseguts (la primera vegada que utilitzeu el Novolizer® s'ha de col·locar la càrrega de la medicació dins del dispositiu):


1. Traieu la tapa de la càrrega.

2. Poseu-hi la càrrega.

3. Traieu el tap de l'embocadura (la finestra serà vermella).



4. Premeu el botó del dispositiu per carregar la dosi (la finestra es torna de color verd).

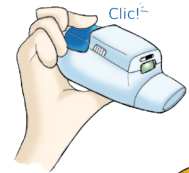

5. Traieu tot l'aire dels pulmons sense bufar per l'embocadura.



6. Ajusteu els llavis a l'embocadura i agafeu aire per la boca ràpidament i enèrgicament; se sentirà un clic. La finestra es torna vermella.



7. Reteniu l'aire dins els pulmons uns 10 segons, o fins que pugueu.



8. Expulseu l'aire lentament.



9. Feu gàrgares i glopegeu en acabar.



10. Poseu-hi el tap.

L'inhalador té un comptador que indica les dosis restants. El comptador gira cada 10 activacions. Inicialment, porta 60 dosis. Quan apareix un senyal amb ratlles vermelles al comptador, vol dir que queden menys de 10 dosis. En arribar al 0, es bloqueja i no permet carregar més dosis.

Per a qualsevol dubte que tingueu, consulteu la infermera.

Com citar l'article:

Grup de respiratori de la CAMFiC,
Instruccions d'ús del Novolizer®.
But At Prim Cat 2017;35:48.